
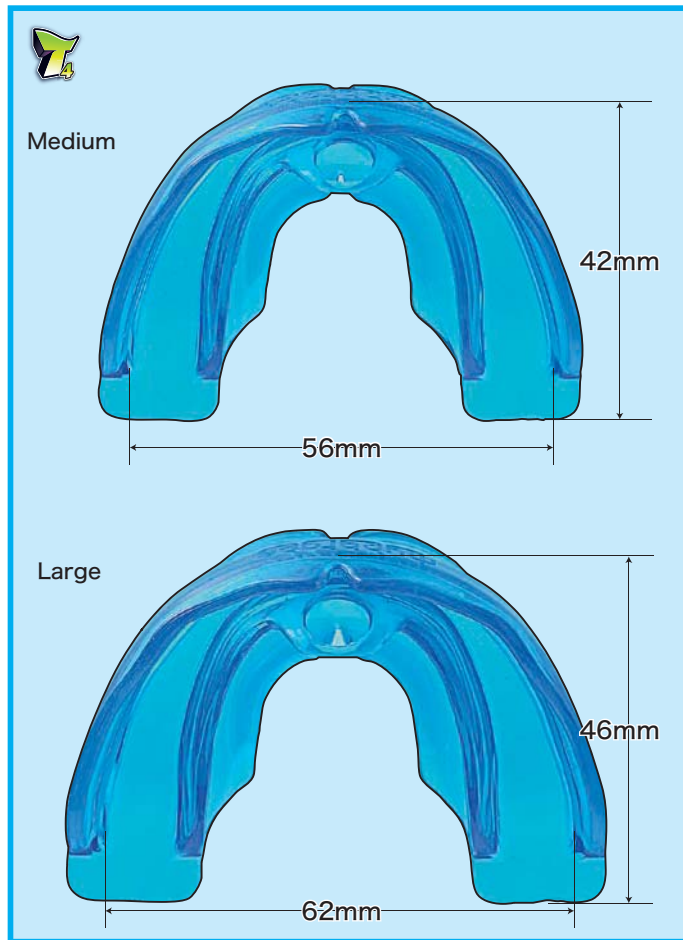


# Myobrace® Size Sheet

原寸大

## Myobrace® for Teens

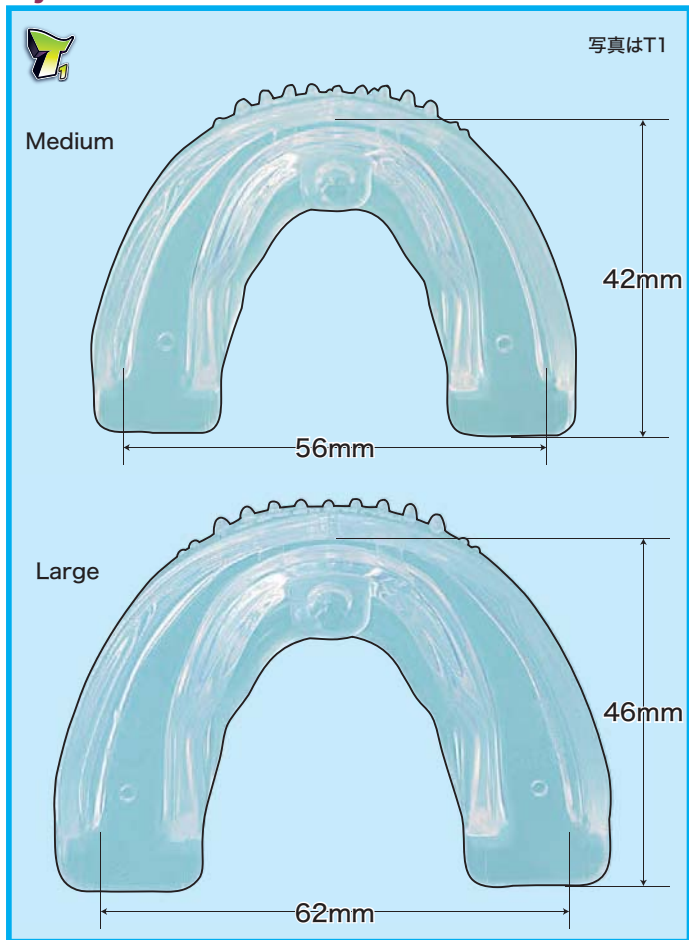

※表示の値はあくまでも使用の目安となります。

## Myobrace® for Teens T3 サイズ選択について

### 使用方法

日中の2時間と就寝時に使用します。コアの無いT3Nを7サイズから患者にあったものを選択し、その後T3に移行します。

### サイズの選択方法

ルーラーを使用して上顎切歯4本の長さを測定し、最適なサイズを選択します。スペースや叢生がある場合でも4歯の合計幅が選択の目安となります。



Myobrace Size	2-2 Upper (mm)	2-2 Lower (mm)	Canine Width Upper (mm)	Canine Width Lower (mm)	Arch Width 6-6 (mm)	Arch Depth A-P (mm)
1	30.0	22.0	7.0	6.5	55.0	42.0
2	31.5	23.0	7.3	6.8	55.0	42.0
3	32.5	23.8	7.5	7.0	60.0	48.0
4	33.5	24.5	7.7	7.2	60.0	48.0
5	35.0	25.5	8.0	7.5	60.0	48.0
6	36.5	26.7	8.5	8.0	60.0	48.0
7	38.0	28.0	9.2	9.0	66.0	52.0

### 原寸 ルーラー

