医療機器認証番号 220AKBZX00107000

## **Lip Trainer**<sup>™</sup>







**Lip Seal Trainer** 





## (in + Lip seal 口輪筋の効果的なトレーニング)

Myotalea® Lip Trainer™は、口唇と頬の筋力・筋伸 張性・筋緊張を改善すると同時に、嚥下を再トレーニン グすることに焦点を当てています。患者さんのアーチ フォームに完全に適合し、口腔周囲筋を効果的に鍛え ることができます。Myobrace®、Myosa®、TMJBDS®、 いずれの治療システムとも併用することができます。


LP-B	LP-P	LP-C	
Blue	Pink	Clear	
シリコン			

## Lip seal 口輪筋の強化と口唇閉鎖の改善

Myotalea® Lip Seal Trainerは、口輪筋の強化と ともに、習慣的な口唇閉鎖の確立を助けます。 Myotalea® Lip Trainer™のストラップとして機能 するだけでなく、Myotalea® Lip Seal Trainer単 体でも、リップシールスペードやトレーニングボー ドにより、口唇の筋力や口唇閉鎖を改善できます。 Myobrace®、Myosa®、TMJBDS®、いずれの治療シ ステムとも併用することができます。

シリコン

LST	-B LS	T-P LS	T-Y L	ST-C
Blue	e P	ink Yel	llow (	Clear

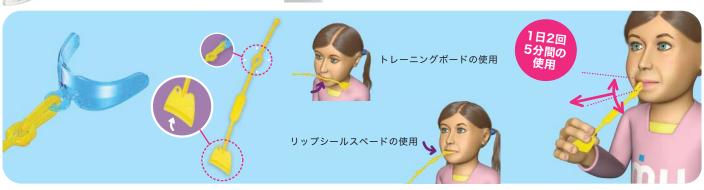

## Myochew™ **Orthodontic Chewing Brush**







TMJBDS®、いずれの治療システムとも併用すること ができます。 ①ブラシ状の突起:

mycchew 矯正用チューイングブラシ

Myochew™は、乳幼児専用に設計されており、鼻呼吸 を促し、舌や咀嚼筋の機能を向上させることで歯と顎 の発育を妨げる問題を効果的に是正するとともに、ブ

ラシが口腔衛生を改善します。Myobrace®、Myosa®、

②タンチューブ: 歯面のクリーニングに役立ちます。 舌を強化します。 2 ④ダブルアーチ: 鼻呼吸を促進します。

③エアースプリング 顎の発達を促進します。 ⑤ティーシングラグ: 歯牙萌出時に噛むことができます。



Pink

使用方法



Mvochew™を持ちます。



タンチューブを上に向けて Myochew™を口腔内に 入れます。



口唇を閉じたまま鼻から 呼吸をします。



舌で繰り返しダンチューブ を押し上げます。



エアースプリングベースを 優しく噛んで押しつぶします。

シリコン Blue

MCHEW-B MCHEW-P