

PO Surfing

白いボディ、青い波形の
パルスオキシメータ。



有機液晶の6モード表示切替機能で、クリニックや病棟、セルフチェックなど、暗い場所でも、左右上下、方向を選ばず、いつでも見やすく測定が可能です。

6モード
表示切替


10段階
輝度調整
機能

透過式パルス
オキシメータ

単4
アルカリ電池
2本使用

リーズナブル
プライス

◆6モード表示、ボタン1つで画面表示を自由自在に

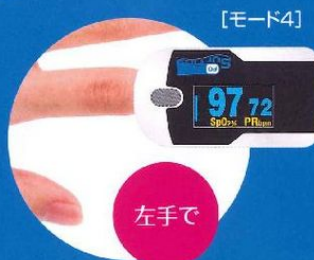


【仕様】

一般的名称	パルスオキシメータ		
販売名	サーフィンPO		
認証番号	221AKBZX00060000		
対象	小児～成人		
機能	SpO ₂	測定範囲	70～99%
		測定精度	80～99%；±2% 70～79%；±3%
	脈拍数	測定範囲	30～235bpm
		測定精度	30～100bpm；±2bpm 101～235bpm；±2%
	6モード表示切替機能*		
10段階輝度調整機能*			
サイズ	寸法：32mm(幅)×34mm(高さ)×58mm(奥行)		
	重量：32g(電池含まず)		
電源	単4アルカリ電池2本		
	電池寿命 連続30時間		
使用温湿度	5～40℃、15～80%RH(結露なきこと)		
保管温湿度	-10～40℃、10～80%RH(結露なきこと)		
EMC	JIS T 0601-1-2:2002		


●管理医療機器 ●特定保守管理医療機器


*6モード表示と10段階輝度調整は、電源を切るたびにデフォルト設定(モード1表示、輝度レベル4)となります。

【各部の名称】

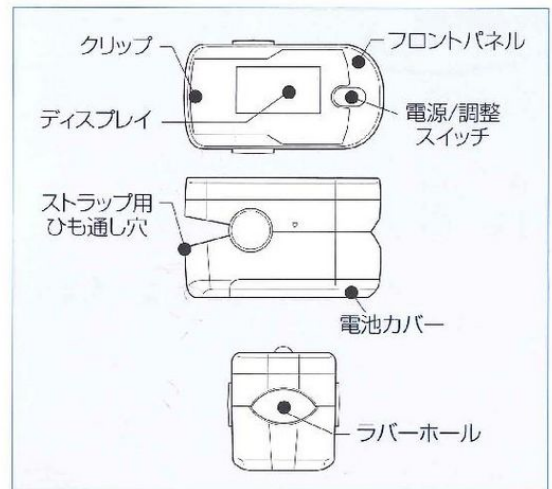

【ディスプレイ表示】

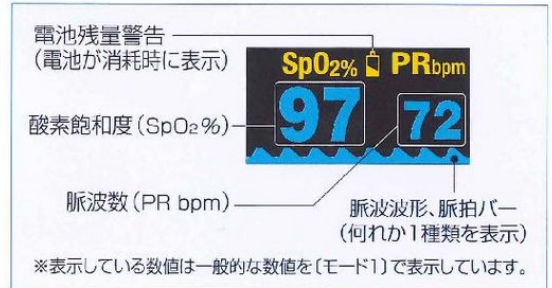

製造販売元  **KOIKE MEDICAL** 株式会社 小池メディカル <http://www.koike-medical.co.jp/> お問い合わせは、お近くの小池メディカル営業所まで

本	社	〒132-0031	東京都江戸川区松島1-24-8	TEL.03(5662)6605	FAX.03(5662)6606
東	京	〒113-0034	東京都文京区湯島2-14-4 STビル1F	TEL.03(5807)6060	FAX.03(5807)6061
札	幌	〒062-0052	札幌市豊平区月寒東2条4丁目10-1	TEL.011(857)4071	FAX.011(857)4077
東	仙台	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町7-4-45	TEL.022(388)8901	FAX.022(388)8930
盛	岡	〒020-0832	盛岡市東見前5-123-4	TEL.019(605)6571	FAX.019(605)6572
新	潟	〒950-0853	新潟市東区東明4-5-4	TEL.025(257)7121	FAX.025(257)7123
郡	山	〒963-0101	郡山市安積町日出山4丁目180-2	TEL.0249(44)7227	FAX.0249(44)7233
い	わ	〒970-1153	いわき市好間町上好間字岸12-4	TEL.0246(36)5311	FAX.0246(36)5323
茨	城	〒308-0847	筑西市玉戸1049-2 サンプラザ1	TEL.0296(20)2033	FAX.0296(20)2055
埼	玉	〒337-0051	さいたま市見沼区東大宮5-34-2 山田ビル2F	TEL.048(684)2051	FAX.048(684)1588
千	東	〒132-0031	東京都江戸川区松島1-24-8	TEL.03(5662)6601	FAX.03(5662)6694
横	浜	〒224-0033	横浜市都筑区茅ヶ崎東4丁目6-1 B102	TEL.045(949)5305	FAX.045(944)0925
静	岡	〒424-0806	静岡市清水区辻3-6-17	TEL.054(371)6170	FAX.054(371)6171
富	山	〒931-8326	富山市上野新町7-43	TEL.076(438)2055	FAX.076(438)3603
高	山	〒506-0051	岐阜県高山市中山町543	TEL.0577(36)3050	FAX.0577(36)2967
名	古	〒453-0865	名古屋市中村区川前町524	TEL.052(413)5224	FAX.052(413)5218
大	阪	〒536-0007	大阪府大阪市城東区成育2-7-2 2F	TEL.06(6932)1931	FAX.06(6932)8823
堺	東	〒599-8112	堺市東区日置荘原寺町415-1	TEL.072(288)2010	FAX.072(288)2011
和	歌	〒640-8412	和歌山市狐島613-80	TEL.073(480)3596	FAX.073(480)3597
広	島	〒733-0024	広島市西区福島町2-33-6	TEL.082(294)0830	FAX.082(294)0987
九	州	〒803-0817	北九州市小倉北区田町14-29	TEL.093(592)5281	FAX.093(592)5333
福	岡	〒816-0063	福岡市博多区金の隈2-17-43 a棟102号	TEL.092(513)3101	FAX.092(513)3661
大	分	〒870-0952	大分市下郡北1丁目122番地	TEL.097(567)3920	FAX.097(567)3921
南	九	〒890-0055	鹿児島県鹿児島市上荒田10-21	TEL.099(284)0545	FAX.099(284)0546
沖	縄	〒901-0152	那覇市字小椋65	TEL.098(859)8077	FAX.098(857)5244
在	宅	〒960-8252	福島市御山一本木10-7	TEL.024(533)5550	FAX.024(533)5766
在	宅	〒300-0874	土浦市荒川沖西2-11-1	TEL.0298(34)2035	FAX.0298(34)2036
在	宅	〒860-0082	熊本市池田4-32-44	TEL.096(319)2201	FAX.096(319)2205

⚠ 注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書及び添付文書をお読み下さい。

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは改善等の為、予告なく変更する場合があります。
- このカタログの記載内容は、2009年4月現在のものです。



Fire Safe

ファイアセイフ

カニューラ
バルブタイプ

ファイアセイフは、万が一の酸素チューブ発火時に、ヒューズのように機能して酸素供給を自動的に止め、酸素による火災への影響を最小限に抑えます。

Better choice. For patient safety.



ファイアセイフが延焼を防止する様子です。
 ファイアセイフに火が到達すると、チューブの延焼をしっかりと止めます。



左:ファイアセイフを取り付けていないチューブ
 右:ファイアセイフを取り付けたチューブ

ファイアセイフは酸素チューブと鼻カニューラや酸素マスクの間に取り付けたり、酸素濃縮器や酸素流量計に直接取り付けることが可能です。

ファイアセイフを取り付け、機能を説明することにより、患者様、またその家族への禁煙、火気厳禁の重要性を改めて認識させることができ、ファイアセイフの存在が、禁煙、火気厳禁の注意を促します。



タバコのみならず様々な危険な火にそなえて



本器は患者様の酸素吸入時の、喫煙や火気使用を推奨するものではありません。
 また、本器はチューブ発火時等の延焼を最小限に抑えるためのものであり、火災事故を防止するための器具ではありません。火災事故等の防止のためには、患者様への指導管理の徹底を図るなど、十分な対策を講じてください。



【仕 様】

	カニューラバルブタイプ	ノズルタイプ
一般的名称	汎用ストップコックバルブ	
販売名	ファイアセーフ	
届出番号	13B1X00009000091	
サイズ	長さ60mm×外径φ14mm	長さ50mm×外径φ19mm
包装	10個/1梱包	
使用流量範囲	0.5~20ℓ/分	25ℓ/分以下
使用圧力	0.45MPa以下	1MPa以下
保管条件		
温度	-20~60℃	-20~60℃
湿度	0~100%	0~100%
使用条件		
温度	0~50℃	0~50℃
湿度	0~100%	0~100%
使用ガス	酸素及び酸素富化空気	

●一般医療機器

Better choice. For patient safety.

製造販売元 **KOIKE MEDICAL** 株式会社 小池メディカル <http://www.koike-medical.co.jp/> お問い合わせは、お近くの小池メディカル営業所まで

本社	〒132-0031	東京都江戸川区松島1-24-8	TEL.03(5662)6605	FAX.03(5662)6606
札幌営業所	〒062-0052	札幌市豊平区月寒東2条4丁目10-1	TEL.011(857)4071	FAX.011(857)4077
東北営業所	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町7-4-45	TEL.022(388)8901	FAX.022(388)8930
盛岡営業所	〒020-0831	盛岡市三本柳12-4-1 藤万ビル1階2号	TEL.019(605)6571	FAX.019(605)6572
新潟営業所	〒950-0853	新潟市東区東明4-5-4	TEL.025(257)7121	FAX.025(257)7123
郡山営業所	〒963-0101	郡山市安積町日出山4丁目180-2	TEL.0249(44)7227	FAX.0249(44)7233
いわき営業所	〒970-1153	いわき市好間町上好間字岸12-4	TEL.0246(36)5311	FAX.0246(36)5323
茨城営業所	〒308-0847	筑西市玉戸1049-2 サンプラザ1	TEL.0296(20)2033	FAX.0296(20)2055
埼玉営業所	〒337-0051	さいたま市見沼区東大宮5-34-2 山田ビル2F	TEL.048(684)2051	FAX.048(684)1588
東京千葉営業所	〒132-0031	東京都江戸川区松島1-24-8	TEL.03(5662)6601	FAX.03(5662)6694
横浜営業所	〒224-0033	横浜市都筑区茅ヶ崎東4丁目6-1 B102	TEL.045(949)5305	FAX.045(944)0925
静岡営業所	〒424-0806	静岡市清水区辻3-6-17	TEL.054(371)6170	FAX.054(371)6171
富山営業所	〒931-8326	富山市上野新町7-43	TEL.076(438)2055	FAX.076(438)3603
高山営業所	〒506-0051	高山市中山町543	TEL.0577(36)3050	FAX.0577(36)2967
名古屋営業所	〒453-0865	名古屋市中村区川前町524	TEL.052(413)5224	FAX.052(413)5218
大阪営業所	〒536-0007	大阪市城東区成育2-7-2 2F	TEL.06(6932)1931	FAX.06(6932)8823
堺営業所	〒599-8112	堺市東区日置荘原寺町415-1	TEL.072(288)2010	FAX.072(288)2011
和歌山営業所	〒640-8412	和歌山市狐島613-80	TEL.073(480)3596	FAX.073(480)3597
広島営業所	〒733-0024	広島市西区福島町2-33-6	TEL.082(294)0830	FAX.082(294)0987
福岡営業所	〒816-0063	福岡市博多区金の隈2-17-43 a棟102号	TEL.092(513)3101	FAX.092(513)3661
南九州営業所	〒890-0055	鹿児島市上荒田10-21	TEL.099(284)0545	FAX.099(284)0546
沖縄営業所	〒901-0152	那覇市字小禄65	TEL.098(859)8077	FAX.098(857)5244
在宅医療サービスセンター茨城	〒300-0874	土浦市荒川沖西2-11-1	TEL.0298(34)2035	FAX.0298(34)2036
在宅医療サービスセンター熊本	〒860-0082	熊本市池田4-32-44	TEL.096(319)2201	FAX.096(319)2205
特機グループ京都オフィス	〒610-0121	京都府城陽市寺田中大小20-206	TEL.03(5662)6609	FAX.03(5662)6540

▲注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず添付文書をお読み下さい。

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは改善等の為、予告なく変更する場合があります。
- このカタログの記載内容は、2010年9月現在のものです。