


■ユーザー権限設定

「設定変更 / 日付時刻変更 / 外部感度調整 / 内部感度調整」の4つの項目に対して、その作業の実施を「許可」または「不許可」を設定できます。これは、管理者 / 作業責任者 / 上級作業員 / 作業員の4段階それぞれに対して設定できます。

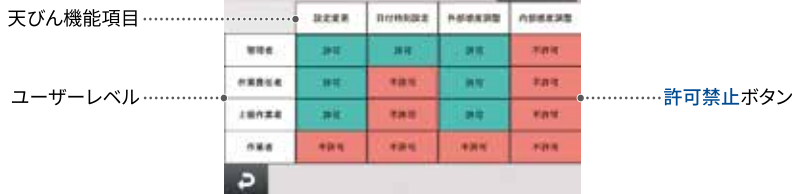

■感度調整

内部感度調整、外部感度調整、自動感度調整、感度調整設定のボタンがあります。それぞれのメニューをタッチパネル画面の説明に従って入力すれば簡単に調整や設定ができます。



■オートドアにより、
定型作業の効率が大幅にアップ

作業がシームレスで、より効率的に



オートドアの設定



オートドアで開ける幅を簡単設定



■BA-Tシリーズ
タッチパネル

足コマの水平あわせ



ユーザー設定(権限・パスワード)設定



日常点検のサポート



■分解・清掃がしやすい計量部

独自のデザインで清掃が容易に



風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防付近は工具を使わず簡単に分解できます。また、溝を無くした構造なので汚れが溜まりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。

型名	BA-6TE	BA-6E	BA-6DTE	BA-6DE	BA-225TE	BA-225	BA-225DTE	BA-225D	BA-125DTE	BA-125D
表示方法	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶
無風イオナイザー	○	○	○	○	○	別売	○	別売	○	別売
オートドア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ひょう量	6.2 g				220 g				120 g	
最小表示	1 µg		1 µg (0~2.1 g) 0.01 mg (2.1~6.2 g)		0.01 mg		0.01 mg (0~51 g) 0.1 mg (51~220 g)		0.01 mg (0~51 g) 0.1 mg (51~120 g)	
最小計量値 (参考値)	1.8 mg		4 mg		20 mg		32 mg		50 mg	
計量皿寸法	φ25mm				φ85mm					
計量モード	g・mg (グラム) / pcs (個数) / % (パーセント) / ct (カラット<宝石用>) / mom (もんめ<真珠用>)									
標準価格 (税抜)	¥1,300,000	¥1,100,000	¥1,200,000	¥1,000,000	¥700,000	¥500,000	¥600,000	¥400,000	¥500,000	¥350,000
JANコード	4981046197793	4981046197786	4981046197878	4981046197779	4981046197809	4981046197816	4981046197847	4981046197830	4981046197854	4981046197823
商品コード	BA6TE	BA6E	BA6DTE	BA6DE	BA225TE	BA225	BA225DTE	BA225D	BA125DTE	BA125D
JCSS校正料金 (税抜) [※]	¥60,000				¥40,000					
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-5E2 1個				AD1603-200E2 1個				AD1603-100E2 1個	

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション	AD-1683A	AX-IR-SWITCH	AX-BM-NEEDESSET	AD-1671	AD-1674	AD-8541-PC-JA	AD-8529PC-W	無風イオナイザー ^{※1}	外部IRスイッチ(イオナイザー用)	放電電極ユニット(4個セット)	天びん用除振台	防振天びん台 ^{※2}	PC接続用ドングル ^{※4}	Bluetooth通信コンバータPC接続用	※BA-TはBluetooth標準搭載	¥75,000 (税抜)	¥15,000 (税抜)	¥5,000 (税抜)	¥78,000 (税抜)	¥490,000 (税抜)	¥9,000 (税抜)	¥26,000 (税抜)	AD-8529PR-W	Bluetooth通信コンバータ	¥26,000 (税抜)	

※1 BA-TシリーズとBA-6E、BA-6DEに標準付属
 ※2 設置費用・送料がかかります。詳細はお問い合わせください
 ※3 保護カバーは1枚標準付属されています
 ※4 BA-T用(BAシリーズはAD-8529PC-Wを使用)