


私たちの行動で救える命があります！

AED-3100

規格

電極パッド	使い捨てパッド P-740
出力	切取指数関数一定電力二相性波形 ActiBiphasic
エネルギー出力 (50Ω時)	漸増式 成人モード時 1回目:150J-2回目:200J-3回目:200J 小児モード時 1回目:50J-2回目:70J-3回目:70J
音声ガイド メモリ	日本語 救助データ:3件90分(1件あたり最大30分)の 心電図波形とイベント情報 セルフテスト履歴:毎日のセルフテスト31件、 毎月のセルフテスト12件、 その他のセルフテスト50件
バッテリー	バッテリーパック SB-310V リチウムバッテリー(充電不可) 待機寿命:4年 容量:160回以上の除細動ショック、 または6時間以上の動作 (新品のバッテリー、20℃のとき) ※待機寿命は、設置環境や使用状況によって短くなります。
振動	MIL-STD-810G 514.6 Category4 Secured Cargo MIL-STD-810G 514.6 Category9 Helicopter
落下	MIL-STD-810G 516.6 Procedure IV Transit Drop 1.22m
外装保護	IEC60529 IP55 装置の正常な動作に支障をきたしたり、 安全を損なう程度の粉塵が内部に侵入せず、 いかなる方向からの水の直接噴流によっても 有害な影響を受けない。
耐用期間	8年間 (当社データの自己認証による、保証期間:5年間)
寸法・質量	幅206×高さ97×奥行252mm 約2.3kg(リッドおよびバッテリーパックを含む)

※バッテリーと電極パッドは、本体に付属されていないので必ずご確認ください。

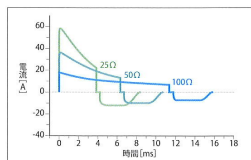

ActiBiphasic

倒れた方のインピーダンスに
左右されることがなく、
除細動に必要なエネルギーを
供給します。

<設定エネルギー 150J>

	一相目	二相目
インピーダンス [Ω]	電流 [A]	時間 [ms]
25Ω	50.4	3.85
50Ω	30.8	6.36
75Ω	22.1	8.86
100Ω	17.2	11.4
125Ω	14.1	13.9

<設定エネルギー 200J>

	一相目	二相目
インピーダンス [Ω]	電流 [A]	時間 [ms]
25Ω	58.1	3.85
50Ω	35.4	6.36
75Ω	25.4	8.86
100Ω	19.8	11.4
125Ω	16.2	13.9

「耐用期間」を過ぎたAEDは、できる限り速やかな更新をお勧めします。

<医療機器「耐用期間」定義>

医療機器が適正な使用環境と維持管理の基に、適切な取り扱いで本来の用途に使用された場合、その医療機器が設計仕様書に記された機能及び性能を維持し、使用することができる標準的な使用期限を医療機器の「耐用期間」と定義する。

(注)電子機器は消費電流
ヘルスケアインク株式会社
2009年5月21日改訂 医療機器「耐用期間」の自主基準(改訂版)より

AED設置管理タグを
よく見せる所に！

忘れないで日常点検！

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも
使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを
日頃から点検する事が重要です。

製造販売業者または販売業者が、設置者の保守管理の手間を軽減する
独自のサービスをご用意しております。お客様の都合に合わせて、
これらを利用し、いつでもAEDが使える状態にしておいてください。

★ AED専用フリーダイヤル ☎0120-701699

★ AED専用ホームページ AEDライフ <http://www.aed-life.com/>

- ・添付文書を必ずお読みください。
- ・AEDに不測の事態が発生した時及び誤送時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)、廃棄時には、日本光電またはAEDを購入された販売店にご連絡ください。

お問合せ先

販売名:自動体外式除細動器 AED-3100 カルジオライフ

医療機器承認番号 22700BZX00187000

クラス分類:高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

製造販売

日本光電

日本光電工業株式会社 東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
☎03-5996-8000(代表) Fax 03-5996-8091

<https://www.nihonkohden.co.jp/>

CAT.NO.65-015E '18.6.CLB.CO. 9470

AED

自動体外式除細動器



自動体外式除細動器

AED-3100 カルジオライフ

made in Japan



日本語 English
BILINGUAL

バイリンガル機能(オプション)

ガイドライン
2015 対応



成人・小児モード
切替スイッチ



パッド使用期限
確認



パッド導通
チェック



100回/分の
動作音



イラスト表示



心電図波形表示



AEDモード



セミオートモード




防塵・防水
(IP55)



Bluetooth
通信



AED Linkage

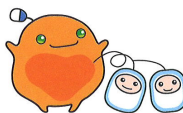

エレクトロニクスで病魔に挑戦

NIHON KOHDEN